

הוראות לנדגם לבדיקת אנטיגן ביתית מפוקחת בוידאו

להלן הפעולות שיש לבצע והדברים שיש להכין על מנת לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת בוידאו:

פעולות נדרשות:

1. קביעת תור בתשלום באתר
2. רכישת ערכת אנטיגן מאושרת על ידי משרד הבריאות בתוקף
3. הכנת תעודה מזהה (ת"ז/רשיון נהיגה/דרכון)
4. וידוא שיש לכם מחשב/טלפון חכם בו נוכל לבצע תקשורת וידאו רציפה.

שלב ראשון – רישום ותשלום לקביעת תור :

- כנסו לאתר : <https://check2fly.co.il/>
- בחרו בזימון תור- בדיקת אנטיגן וידאו
- קראו את התקנון ואשרו אותו.
- **בחרו בדיקה מוסדית בוידאו**
- בחרו את התאריך בו תרצו לבצע את הבדיקה
- בחרו את סוג בדיקה (אנטיגן מפוקח בוידאו)
- בחרו את שעת הבדיקה בהתאם לזמינות התורים הקיימים
- לחצו על הכפתור להוספת פרטי המשתמש
- בצעו את התשלום
- לאחר שלבים אלו תקבלו הודעת SMS עם תאריך ושעת הבדיקה וקישור לזום.


שלב שני – ביצוע הבדיקה

- ביום ובמועד הבדיקה עליכם להיכנס לקישור הבא:
<https://zoom.us/j/92965574087>
- ברגע שתעלו לוידאו הדוגם יציג את עצמו ויבקש מכם להזדהות מול תעודה מזהה
- הדוגם יבדוק את ערכת האנטיגן שברשותכם (את הקופסא עם שם היצרן ותאריך התוקף, מטוש באריזה סגורה, התקן בדיקה בעטיפת מגן, מבחנה עם נוזל, מכסה למבחנה).
- ביצוע הדגימה תתבצע לפי הנחיות הדוגם (ראה הסבר בעמוד הבא)
- שיחת הווידאו תשאר פתוחה לאורך כל זמן, מרגע הזיהוי ועד מתן התוצאה (במידה ולא יהיה רצף, הבדיקה לא תאושר)

שלב שלישי ואחרון – קבלת התוצאה

לאחר 15 דקות בהם הדוגם צפה ובדק את התוצאה, תינתן תשובה חיובית, שלילית או פסולה. התשובה תשודר למשרד הבריאות ותשלח אליכם.

- בכל הבדיקות יתבצע ראשית דיגום מהלוע ולאחר מכן דיגום מהאף.
- הניחו את המבחנה בתוך העיגול המקווקו בחלק האחורי של החבילה בכדי שהנוזל בתוכה לא יישפך כשאתה טובל בה את המטוש.

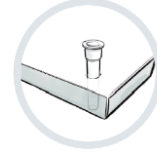

הוציאו המטוש מעטיפתו.




- הסירו את המכסה מעל המבחנה עם הנוזל



- העמידו את המבחנה עם הנוזל בצורה יציבה.

- יש לדגום קודם את הלוע (ולאחר מכן את הנחיריים).

הדיגום יבוצע באזור העליון ובצדי הלוע. כדי לבצע זאת יש להוציא לשון החוצה ולקחת משטח מהאזורים שצויינו.


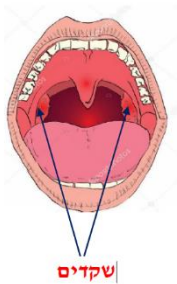


- דיגום מהאף – יבוצע מחלל האף האמצעי. יש להכניס את המטוש לאף לעומק מקסימלי של 2.5 ס"מ או עד שנתקלים

בהתנגדות. במקום זה יש לעצור ולסובב את המטוש מספר פעמים. יש להמתין כ 10 – 15

שניות. לאחר מכן יש להוציא את המטוש.

- חיזרו על אותה הפעולה עם אותו המטוש בנחיר השני

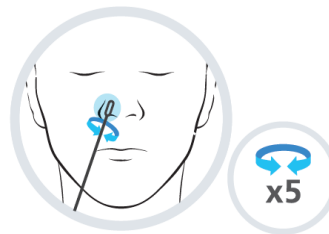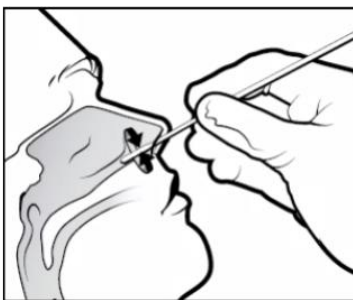

- לאחר ביצוע הדיגום יש להניח את המטוש בתוך מבחנת נוזל המיצוי עד לקרקעיתה, יש לסובב את המטוש 6 פעמים. לאחר מכן יש להשאיר את המטוש במבחנה ל 60 שניות.



- הוציאו אותו תוך כדי סחיטה ע"י לחיצת 2 צידי המבחנה הגמישים.

- שימו את המטוש בתוך שקית הפסולת מפלסטיק.

- יש לדחוף את פקק "הזרבובית" בחוזקה לתוך מבחנת המיצוי למנוע



דליפות.

- יש לשלוף את התקן הבדיקה מעטיפת המגן

- כעת יש לסחוט בעדינות את מבחנת המיצוי כך ש-4 טיפות נוזל יטפטפו לתוך הבאר



בקידמת הכרטיס המסומנת "S"